



Liebe Eltern,
wie bereits im 1. Elternbrief angekündigt schicke ich Ihnen jetzt alle wichtigen Informationen zur Testpflicht, beginnend am Montag, den 12.4.2021

Testungen – Betreuungskinder/Schulkinder:

Sobald die Tests für die Schule (**CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Self Test**) vorliegen, werden wir mit den Kindern die Tests – zunächst mit den Betreuungskindern in dieser Woche – zweimal morgens durchführen.

Es ist ratsam und auch für uns in der Schule sehr wichtig, dass Sie als Eltern mit Ihren Kindern den Vorgang eines Selbsttests im Vorfeld zu Hause durchsprechen, damit die Kinder schon vorab von den Ihnen vertrauten Personen (Eltern!) in die Handhabung eingewiesen sind. Dies gibt allen – vor allem Ihrem Kind – die notwendige Sicherheit hierbei. Wir werden selbstverständlich auch nochmals in der Schule vor den Testungen das Prozedere erneut durchsprechen.

Falls ein Kind dabei **positiv getestet** wird, **muss es zu Hause bleiben** bzw. die Schule wird Sie als Eltern benachrichtigen, damit Sie Ihr Kind umgehend abholen (wie bei jeder Erkrankung auch). Bis dahin wird es von uns als Schule zunächst weiter betreut (anderer Raum – unter Aufsicht).

Wichtig ist grundsätzlich für die Testung zu wissen: Ein Testergebnis kann fehlerhaft sein, positiv heißt also noch nicht unbedingt, dass man tatsächlich infiziert ist. Wenn ein Selbsttest positiv ausfällt, lässt man anschließend beim Arzt einen PCR-Test durchführen, der viel sicherer ist und dann für Klarheit sorgt. **Dies sollten Sie Ihrem Kind ebenfalls vermitteln, wir werden dies auch allen Kindern entsprechend vermitteln – neben der adäquaten Einführung in die Selbsttestung.** Für einen positiven Test kann niemand etwas und erst der Test beim Arzt kann wirklich Aufschluss geben und danach würde – bei positivem dortigem Ergebnis – alles Notwendige von der Arztpraxis und dem Gesundheitsamt eingeleitet. Vorher würde **das Kind nur zunächst einmal vorsorglich nicht am Unterricht teilnehmen können, bis alles abgeklärt ist – dies gilt natürlich auch für uns Erwachsene in der Schule!**

Auf den hier angegebenen Seiten finden Sie alle wichtigen und hilfreichen Informationen zum Testmaterial und dazu auch ein anschauliches Video, wie der Selbsttest durchzuführen ist:

<https://www.schulministerium.nrw/selbsttests>

<https://www.clinitest.siemens-healthineers.com>

<https://youtu.be/Lr6PFWSIxzq>

(anschauliches Video für die Selbsttestung aus Berlin – bei uns in NRW wird die Pflicht zur Durchführung der Selbsttests für die Kinder in der Schule erfüllt.)

Da wir noch nicht wissen, ob uns die Tests bereits ab Montag zur Verfügung stehen, empfehlen wir Ihnen und bitten Sie als Eltern/Erziehungsberechtigte vor allem der Kinder, die eine Betreuung ab Montag benötigen darum, am Wochenende die Möglichkeit von Bürgertests für Ihre Kinder zu nutzen.

Hier zwei Adressen, wo dies möglich ist:

in der Bären-Apotheke: <https://nordkirchen.baeren-apotheken.de/coronavirus-info>

in den DRK-Teststationen: <https://drk-teststationen.de>

Herzliche Grüße
Angela Tönnis
(Schulleiterin)



Anleitung zur Selbsttestung:

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Kurzanleitung für Patienten

Diese Anleitung unterstützt Sie bei der Verwendung des **SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test**. Lesen Sie vor der Verwendung dieses Tests unbedingt die Gebrauchsanweisung für Patienten.

Haben Sie Fragen?

Eine schnelle Antwort auf häufig gestellte Fragen finden Sie unter werner.roche.dolag-patienten@nordkirchen.de oder fragen Sie Ihren Apotheker. Oder rufen Sie unser Kundenservice-Center an unter der Rufnummer 08002324820 (Montag bis Freitag von 08:00 – 18:00 Uhr).

Wichtige Sicherheitsinformationen



Warnung!

- Waschen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife oder verwenden Sie ein Handdesinfektionsmittel, bevor Sie den Test durchführen.
- Halten Sie den Tupfer sauber. Vermeiden Sie es, die Spitze des Tupfers zu berühren, und stellen Sie sicher, dass er vor der Verwendung keine Oberflächen berührt.
- Achten Sie darauf, dass Sie für die Probenentnahme die korrekten, beigelegten Abstrichtupfer des Herstellers "Miraclean Technology" verwenden (korrekt: P/N 93050; nicht zu verwenden: P/N 96000).

Komponenten des Testkits

Teststreifen



Verpackungsbeutel und Trockenmittel



Extraktionspuffer Röhren und Spenderkappe



Steriler Abstrichtupfer (Marke: Miraclean, P/N 93050)

Diese Komponenten sollten Sie zur Testdurchführung vor sich haben:

- Teststreifen (einzeln verpackt im Verpackungsbeutel mit Trockenmittel)
- Röhren mit Extraktionspuffer
- Spenderkappe
- Steriler Abstrichtupfer (Marke: Miraclean)


Was Sie noch zusätzlich benötigen:

- Stoppuhr

1 Test vorbereiten

1. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung für den Patienten für den **SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test** genau durch.



2. Überprüfen Sie das Verfallsdatum  auf der Rückseite des Verpackungsbeutels. Verwenden Sie den Test nicht mehr, wenn das Verfallsdatum überschritten ist.



3. Öffnen Sie den Verpackungsbeutel an der Einrisslinie und entnehmen Sie den Teststreifen sowie die Tüte mit Trockenmittel.

4. Vergewissern Sie sich, dass der Teststreifen unverseht ist und dass die Statusanzeige des Trockenmittels gelb ist (= zur Verwendung geeignet).




2 Nasenabstrichprobe entnehmen und vorbereiten

1. Waschen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife oder verwenden Sie ein Handdesinfektionsmittel, bevor Sie den Test durchführen.
2. Nehmen Sie den Abstrichtupfer aus der Verpackung. Achten Sie dabei darauf den Tupfer nur am Griff zu berühren, nicht an der Spitze mit dem „Wattebausch“.
3. Neigen Sie Ihren Kopf leicht nach hinten.
4. Führen Sie den Tupfer mit dem „Wattebausch“ voran in ein Nasenloch ein. Schieben Sie den Tupfer langsam ca. 2 cm vorwärts (parallel zum Gaumen – Richtung Rachen, nicht nach oben), bis Sie einen Widerstand spüren. Üben Sie dabei keinen Druck aus.

5. Drehen Sie den Tupfer 4-mal (insgesamt ca. 15 Sekunden lang) gegen die Naseninnenseite und entnehmen Sie ihn dann aus der Nase.

6. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 5 mit demselben Abstrichtupfer im anderen Nasenloch.
Hinweis: Die Proben aus beiden Nasenlöchern müssen mit demselben Abstrichtupfer entnommen werden.

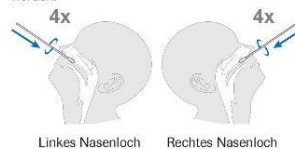

7. Stellen Sie den Abstrichtupfer in ein Röhren mit Extraktionspuffer. Drücken Sie das Röhren im unteren Bereich zusammen und drehen Sie den Tupfer mehr als 10-mal hin und her.

8. Drücken Sie die Seiten des Röhrens weiterhin zusammen, während Sie den Tupfer entnehmen, um die gesamte Flüssigkeit aus dem Tupfer zu pressen.



WARNUNG! Wenn das Röhren nicht zusammengedrückt wird, kann ein Überschuss von Puffer am Tupfer zu falschen Ergebnissen führen.

9. Verschließen Sie das Röhren fest mit der Spenderkappe.

Fahren Sie mit **3 Test durchführen** fort.

3 Test durchführen

1. Legen Sie den Teststreifen auf eine ebene Fläche.
2. Halten Sie das Röhren senkrecht über das runde markierte Feld (nicht das rechteckige Ergebnisfenster).

3. Tropfen Sie genau 4 Tropfen auf das Feld auf. Drücken Sie dafür falls nötig das Röhren leicht zusammen.
Hinweis: Sie können den Test auch fortsetzen, wenn Sie versehentlich 5 Tropfen aufgetragen haben.



4. Stellen Sie die Stoppuhr und lesen Sie das Testergebnis nach 15 bis 30 Minuten ab.

WARNUNG! Wenn das Testergebnis **nach mehr als 30 Minuten** abgelesen wird, kann das Ergebnis falsch sein.

